
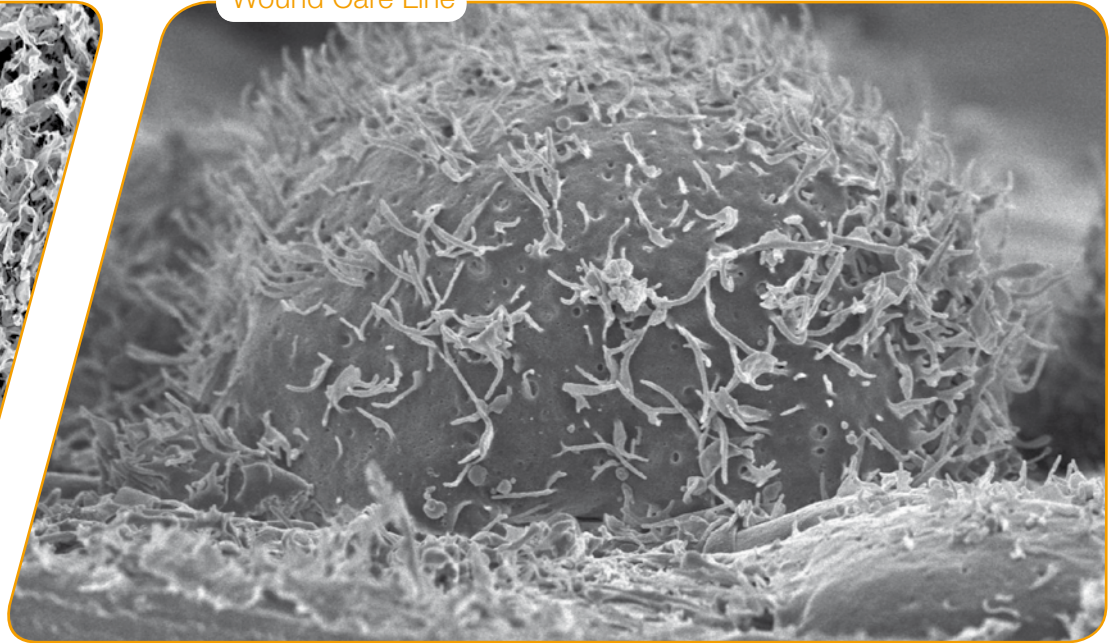


Wound Care Line

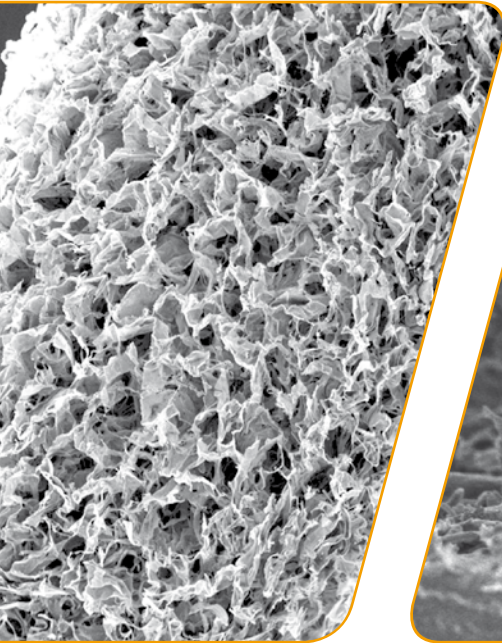

MB-Collagen

Kollagenauflage zur Wundversorgung

Eigenschaften:

- hocheffektives lokales Haemostyptikum
- fördert die Wundheilung
- innerhalb von 1-2 Wochen vollständig resorbierbar
- reduziert die Häufigkeit von Verbandswechseln
- einfache Handhabung

MB-Collagen

CE 0499



MB-Collagen ist eine Wundauflage auf Kollagenbasis zur Versorgung traumatischer und schlecht heilender Wunden wie Dekubitus oder Ulcus cruris.

Die Wirksamkeit von MB-Collagen liegt einerseits in der chemotaktischen Wirkung der Kollagenmatrix, die zur Ansiedlung von Fibroblasten aus dem Wundgrund führt. Andererseits bindet das angebotene Kollagen die in der Überzahl vorhandenen Proteasen. Beide Mechanismen wirken komplementär und schaffen die Voraussetzungen für eine nachhaltige und effiziente Wundversorgung. MB-Collagen eignet sich zudem zur Kombination mit Wirkstoffen wie z.B. Bakterioziden.

Weitere Eigenschaften:

- Medizinprodukt Klasse III nach 93/42/EWG
- zertifiziert nach DIN EN ISO 13485:2012
- Herstellung in Anlehnung an GMP-Leitfaden
- hervorragende Biokompatibilität
- Gamma sterilisiert

Spezifikationen

Art-Nr.	Größe	Inhalt
REF 0505C	50x50x6 mm	3 Stück pro Box
REF 0510C	50x100x6 mm	3 Stück pro Box
REF 1010C	100x100x6 mm	3 Stück pro Box