


Hemostat Line

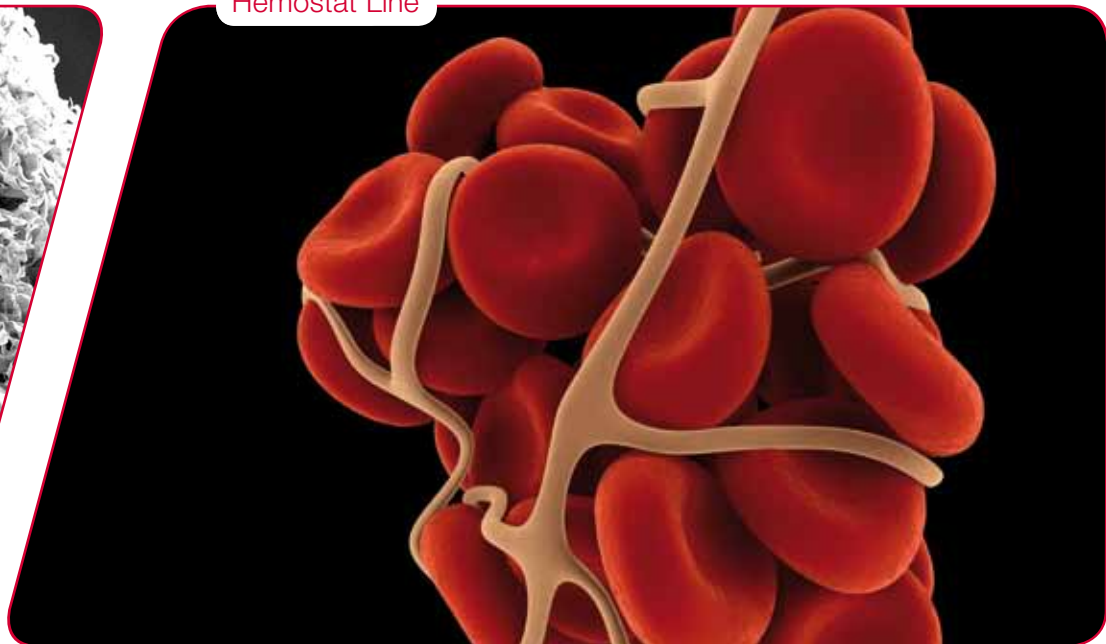

Surgicoll

Resorbierbares, hochwirksames Hämostyptikum
auf Kollagenbasis

Eigenschaften:

- äußerst effizient für die lokale Haemostase
- fördert die Wundheilung
- vollständig resorbierbar innerhalb von 1-2 Wochen
- leichte und einfache Handhabung
- verfügbar als Vlies (Surgicoll), Kegel (Surgicoll Plug) oder feinflockiges Pulver (Surgicoll Cloud)

Surgicoll

CE 0499



Surgicoll ist eine vollständig resorbierbare, schwammartige Kollagenmatrix zur effektiven lokalen Hämostase. Die ausgezeichnete hämostatische Wirkung von Kollagen ist bekannt und wird in zahlreichen Fachpublikationen beschrieben.

Das schwammartige Kollagengerüst sorgt über zwei komplementär wirkende Mechanismen für eine zügige und zuverlässige Blutgerinnung. Während die Quelleigenschaften des Kollagengerüsts zur Konzentration der Blutplättchen und damit zu einer beschleunigten Pfropfbildung führen, lösen die chemischen und topologischen Eigenschaften der Kollagenfibrillen mit der Aggregation der Blutplättchen die Freisetzung von Blutgerinnungsfaktoren aus, die die Koagulationskaskade aktivieren.

Weitere Eigenschaften:

- Medizinprodukt Klasse III nach 93/42/EWG
- zertifiziert nach DIN EN ISO 13485:2012
- Herstellung in Anlehnung an GMP-Leitfaden
- hervorragende Biokompatibilität
- Gamma sterilisiert
- doppelt sterile Verpackung zum hygienischen Einschleusen in den OP-Bereich

Spezifikationen

Produkt	REF Nr.	Größe	Inhalt/Box
Surgicoll	S0101K	1x1x0,5 cm	10x3 Stück
Surgicoll	S0505K	5x5x0,5 cm	10 Stück
Surgicoll	S0510K	5x10x0,5 cm	10 Stück
Surgicoll	S1010K	10x10x0,5 cm	5 Stück
S. Cloud	1 025 PSC	0,25 g	5 Beutel
S. Cloud	1 050 PSC	0,50 g	5 Beutel
S. Plug	ConeSP	0,01 g	5 Stück

